

Create it 

TIP GUIDE

ULTRASCHALL
CHIRURGIE



NSK

VARIOSURG AUFSATZ-SORTIMENT

SURG

KNOCHENCHIRURGIE	05 - 12
SCHABER	13 - 14
EXTRAKTION	15 - 16
INTERNER SINUSLIFT (KRESTALER ZUGANG)	17 - 20
IMPLANTATVORBEREITUNG	21 - 24
INTERNER SINUSLIFT (KRESTALER ZUGANG)	25 - 26*
SINUSLIFT	27
SINUSMEMBRAN-ABLÖSUNG	28

PERIO

SCALING	29 - 31
PARODONTOLOGIE	32
IMPLANTAT-/ZAHNERSATZERHALTUNG	33 - 34

ENDO

ENDODONTIE	35 - 36
AUFSATZ-SETS	37 - 40

*Bildmaterial zur Verfügung gestellt von Yasuhiro Kizu, D.D.S., Ph.D.
OMFC (ORAL & MAXILLOFACIAL CARE CLINIC YOKOHAMA)

- SURG** SURG-Modus für Knochenchirurgie
- PERIO** PERIO-Modus für Scaling-Anwendungen
- ENDO** ENDO-Funktion für Wurzelkanalbehandlung



Die Aufsätze sind so ausgelegt, dass sie das Gewebe schützen, die Schnittgeschwindigkeit beibehalten und sich leicht in den Knochen fräsen. Die dreidimensionale Fräsung der Sägezähne verbessert die knochenchirurgische Effektivität und verringert Blockierungen.

KNOCHENCHIRURGIE	SCHABER	EXTRAKTION	INTERNER SINUSLIFT (KRESTALER ZUGANG)
IMPLANTATVORBEREITUNG	SINUSLIFT	SINUSMEMBRAN-ABLÖSUNG	SCALING
PARODONTOLOGIE	IMPLANTAT-/ZAHNERSATZERHALTUNG	ENDODONTIE	AUFSATZ-SETS



Thermodesinfizierbar



Autoklavierbar

HOHE LEISTUNG

Aufsätze mit dieser Kennzeichnung können bis zu einer Leistungseinstellung von 150% betrieben werden.

VarioSurg 3

ERWEITERTES POTENZIAL

Für eine effiziente und schonende Behandlung


Ultraschall-Chirurgiesysteme sind in der heutigen Implantat-Behandlung kaum mehr wegzudenken. Das VarioSurg 3 System trägt mit seiner enormen Scheideffizienz und dem leichten, schlanken Handstück wesentlich dazu bei, Eingriffe ergonomisch und schnell zu gestalten. Die große Auswahl an erhältlichen Aufsätzen macht vielfältige Behandlungsformen möglich.





KNOCHENCHIRURGIE

MODELL **SG1** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%

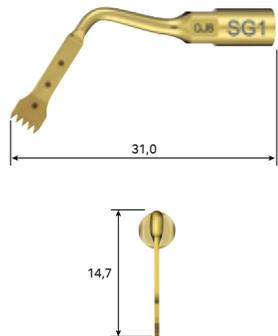


BESTELLCODE
Z305101

- TiN-Beschichtung
- Punktmarkierung 3, 6 und 9 mm von der Oberseite der Spitze aus
- Fünf Zähne, 0,6 mm dick

MODELL **H-SG1** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 150%

HOHE LEISTUNG

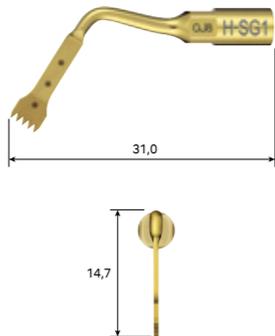


BESTELLCODE
Z305151

- TiN-Beschichtung
- Punktmarkierung 3, 6 und 9 mm von der Oberseite der Spitze aus
- Fünf Zähne, 0,6 mm dick

MODELL **SG1A** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%

Für die Verwendung in tieferen Regionen, die längere Aufsätze erfordern.

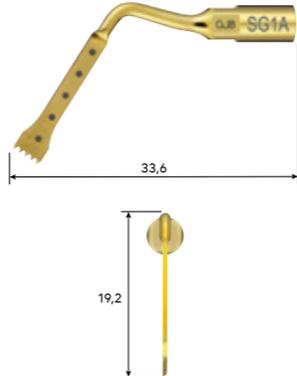


BESTELLCODE
Z305138

- TiN-Beschichtung
- Punktmarkierung 3, 6, 9, 12 und 15 mm von der Oberseite der Spitze aus
- Fünf Zähne, 0,6 mm dick



Einseitige anteriore mandibuläre Entnahme
SG1, H-SG1, SG1A

MODELL **SG8** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%

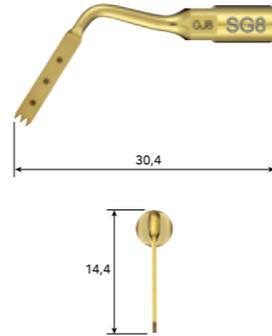


BESTELLCODE
Z305109

- TiN-Beschichtung
- Punktmarkierung 3, 6 und 9 mm von der Oberseite der Spitze aus
- Drei Zähne, 0,6 mm dick

MODELL **H-SG8** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 150%

HOHE LEISTUNG

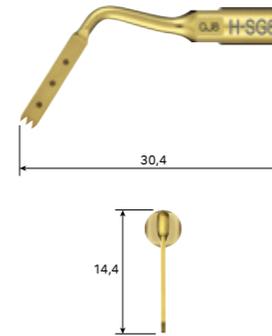


BESTELLCODE
Z305155

- TiN-Beschichtung
- Punktmarkierung 3, 6 und 9 mm von der Oberseite der Spitze aus
- Drei Zähne, 0,6 mm dick

MODELL **SG8A** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%

Für die Verwendung in tiefer gelegenen Bereichen, die längere Aufsätze erfordern.



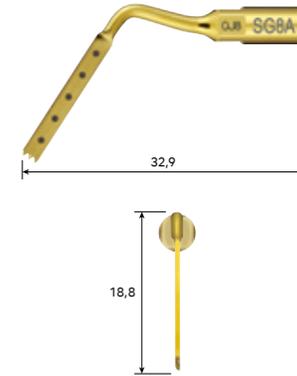


BESTELLCODE
Z305139

- TiN-Beschichtung
- Punktmarkierung 3, 6, 9, 12 und 15 mm von der Oberseite der Spitze aus
- Drei Zähne, 0,6 mm dick

MODELL **SG14R** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%

MODELL **SG14L** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%

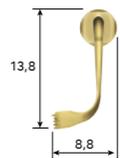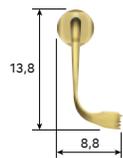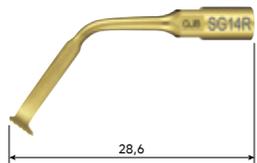

BESTELLCODE

Z305122

BESTELLCODE

Z305123

- TiN-Beschichtung • 90° rechtsgebogener Aufsatz*
- Fünf Zähne, 0,6 mm dick

- TiN-Beschichtung • 90° linksgebogener Aufsatz*
- Fünf Zähne, 0,6 mm dick



Anteriore mandibuläre Entnahme
SG14R, SG14L


*Die Kurvenrichtung der Spitze wird durch die Vorderansicht der Spitze definiert.

MODELL **H-SG8R** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 150%

MODELL **H-SG8L** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 150%

HOHE LEISTUNG

HOHE LEISTUNG

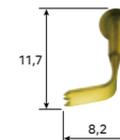

BESTELLCODE

Z305156

BESTELLCODE



Z305157

- TiN-Beschichtung • 90° rechtsgebogener Aufsatz*
- Drei Zähne, 0,6 mm dick

- TiN-Beschichtung • 90° linksgebogener Aufsatz*
- Drei Zähne, 0,6 mm dick

*Die Kurvenrichtung der Spitze wird durch die Vorderansicht der Spitze definiert.

MODELL **SG2R** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%

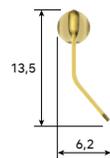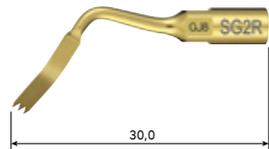

BESTELLCODE



Z305102

- TiN-Beschichtung • Rechtsgebogene Spitze*
- Drei Zähne, 0,6 mm dick



Exzision einer Knochenvorwölbung
SG2R, SG2L

MODELL **SG2L** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%

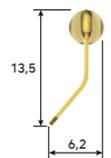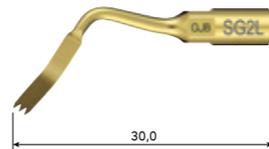


BESTELLCODE

Z305103

- TiN-Beschichtung • Linksggebogene Spitze*
- Drei Zähne, 0,6 mm dick

MODELL **SG19** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%

Für das Schneiden in gewölbten Flächen.

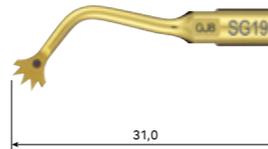

BESTELLCODE

Z305135


- TiN-Beschichtung
- Punktmarkierung 3 mm von der Spitzenfront aus
- Fünf Zähne, 0,8 mm dick



Mandibuläre Entnahme in der Näherungsphase
SG19

MODELL **SG30** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 50%

Für schmale Schnitte mit geringem Knochenverlust. Auch für Kortikotomien geeignet.

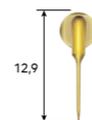

BESTELLCODE

Z305137


- TiN-Beschichtung • Scharfkantig • 0,5 mm dick



Alveolare krestale Inzision für die Knochenentnahme (bei schmaler werdenden Schnitten)
SG30

MODELL **SG58** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%

Für die Entfernung von Vorwölbungen am posterioren Unterkiefer oder auf der mandibulären Lingualfläche.

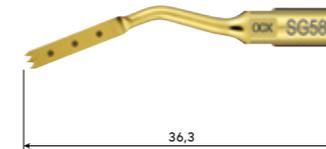

BESTELLCODE


Z305141

- TiN-Beschichtung
- Punktmarkierung 3, 6 und 9 mm von der Oberseite der Spitze aus
- Drei Zähne, 0,6 mm dick



Eine Knochenvorwölbung ist zu entfernen
SG58

MODELL **SG68** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%

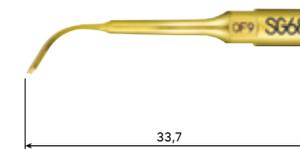

BESTELLCODE

Z305143

- TiN-Beschichtung • Punktmarkierung 2 und 4 mm von der Oberseite der Spitze aus (nur eine Seite) • Drei Zähne, 0,6 mm dick



Vertikale Osteotomie zur Gewinnung von Knochenspänen
SG68

*Die Kurvenrichtung der Spitze wird durch die Vorderansicht der Spitze definiert.

SCHABER



Zur Glättung des Alveolarkamms oder zur Entnahme von Knochenfragmenten. **SCHABER**

MODELL **SG3**






LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%

MODELL **SG4**

LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%

MODELL **SG5**

LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%

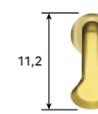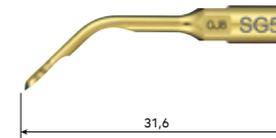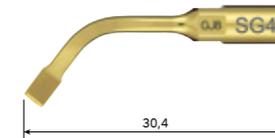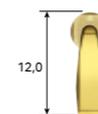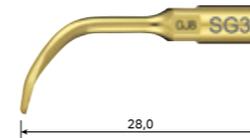

BESTELLCODE

Z305104

BESTELLCODE

Z305105


BESTELLCODE

Z305106


- TiN-Beschichtung
- Dreiseitige Kantenspatelspitze
- einseitige Schabefläche

- TiN-Beschichtung
- Kantenspatelspitze
- zweiseitige Schabefläche

- TiN-Beschichtung
- Runde Kantenspatelspitze
- einseitige Schabefläche

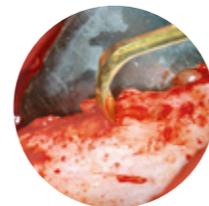

Abflachung des Alveolarkamms
SG3

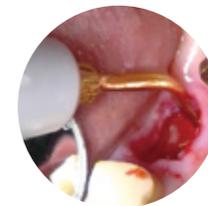

Osteoplastiken
SG5



EXTRAKTION

Durchbricht die Wurzelhaut für eine optimale Nahtentfernung.
Auch bei der Extraktion ankylosierter Zähne effektiv.

EXTRAKTION

MODELL **SG17**


LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%

MODELL **SG18R**

LEISTUNGSSTUFE **SURG** 50%

MODELL **SG18L**

LEISTUNGSSTUFE **SURG** 50%

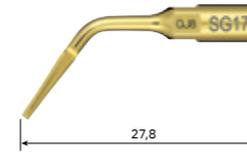

BESTELLCODE

Z305132


• TiN-Beschichtung • 0,7 mm dick



BESTELLCODE

Z305133

• TiN-Beschichtung • Rechts abgewinkelte Spitze*
• 0,7 mm dick

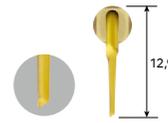

BESTELLCODE


Z305134

• TiN-Beschichtung • Links abgewinkelte Spitze*
• 0,7 mm dick



Extraktion
SG17, SG18R, SG18L


*Die Kurvenrichtung der Spitze wird durch die Vorderansicht der Spitze definiert.

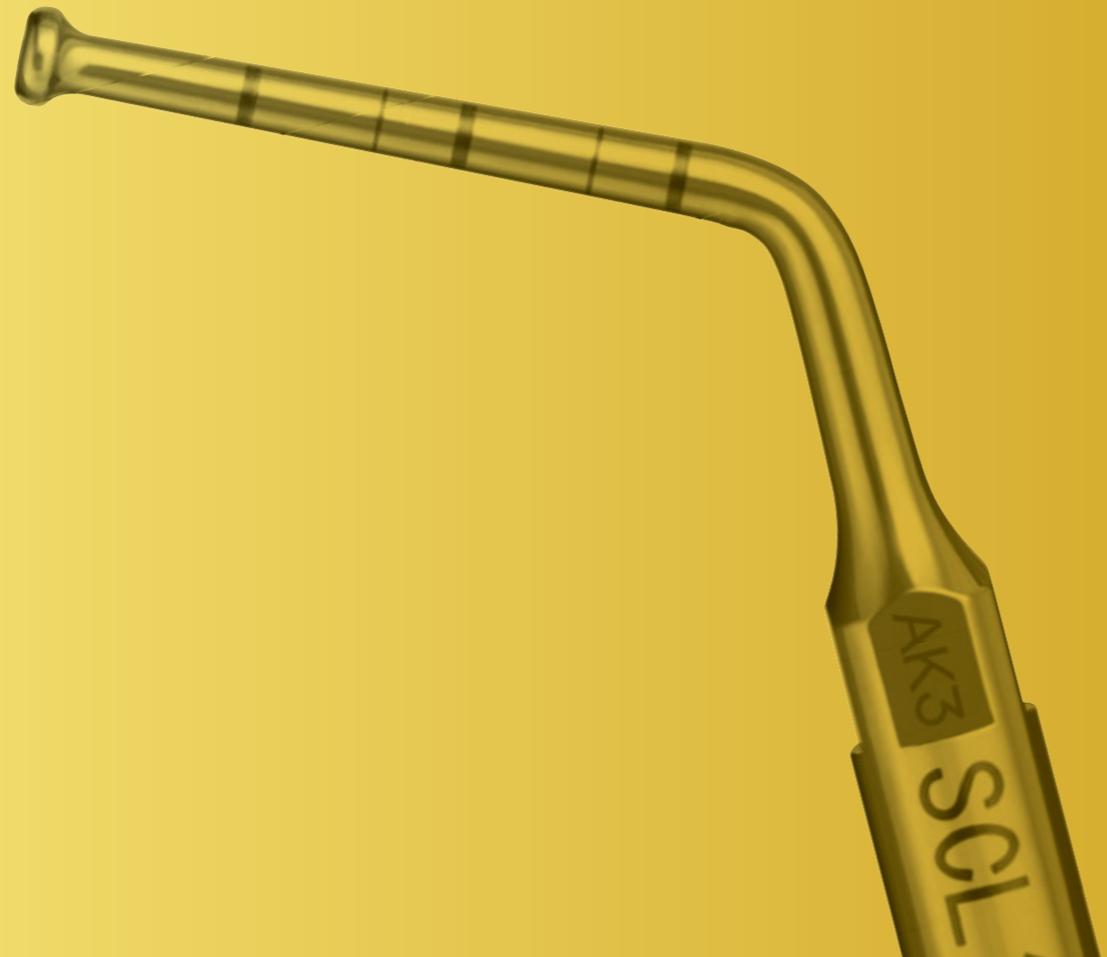

INTERNER SINUSLIFT
(KRESTALLER ZUGANG)

INTERNER SINUSLIFT (KRESTALER ZUGANG) Interne Sinuslift-Eingriffe.


Mit dem internen Sinuslift-Aufsatz wird die Sicherheit von Eingriffen optimiert, da er ein weniger invasives Arbeiten und Sinuslifts mit kurzen Behandlungszeiten ermöglicht. Eine Osteotomie mit Ultraschallvibration verringert das Risiko einer Beschädigung der Schneiderschen Membran. Da beim Osteotomieverfahren kein Hämmern erforderlich ist, verringert dies für die Patienten Unbehagen und das Risiko von Schwindel.

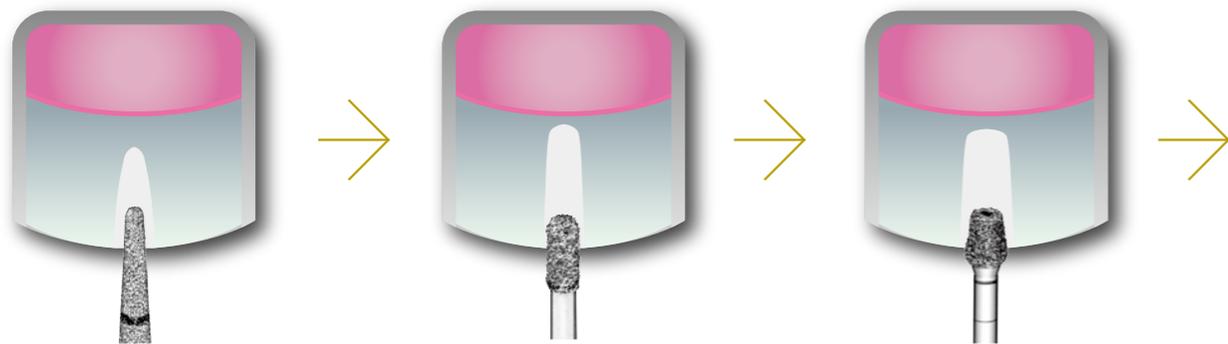

Ein Ansatzpunkt für die Knochenformung wird erzeugt.

Knochenformung zur Vorbereitung des Implantatbetts.

Erweiterung und Ausarbeitung des Implantatbetts.

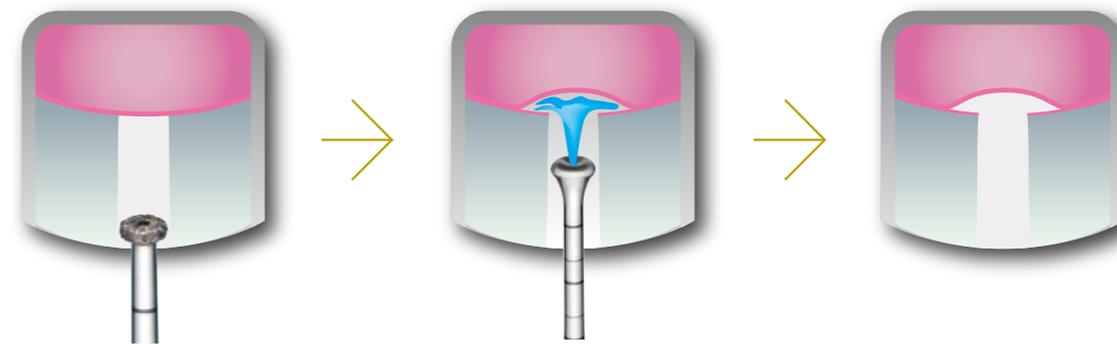

Kieferhöhlenperforation und Knochenformung auf Alveolarkamm.

Zuverlässige Anhebung der Schneiderschen Sinusmembran durch interne Spülung.



Ausarbeitung des Implantatbetts nach Anhebung der Schneiderschen Sinusmembran.

IMPLANTATVORBEREITUNG

Für die Vorbereitung von Implantatbetten, die Erzeugung von Ansatzpunkten und andere Verfahrensschritte.

MODELL **SG15A** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 50%

MODELL **SG15B** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 50%

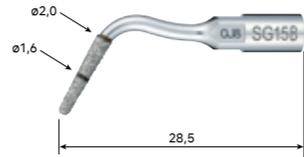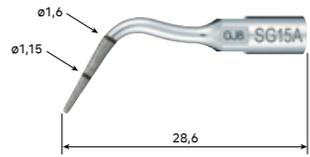

BESTELLCODE
Z305124

BESTELLCODE
Z305125

- Diamant-Beschichtung
- Durchmesser des Spitzenendes 0,7 mm
- Markierungen im Abstand von 5 mm und 10 mm ab Aufsatzspitze

- Diamant-Beschichtung
- Durchmesser des Spitzenendes 1,3 mm
- Markierungen im Abstand von 5 mm und 10 mm ab Aufsatzspitze






Implantatvorbereitung
SG15A, SG15B

Für die Vorbereitung von Implantatbetten, die Abflachung von Knochenflächen und andere Verfahrensschritte.

IMPLANTATVORBEREITUNG

MODELL **SG15C** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 50%

MODELL **SG15D** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 50%

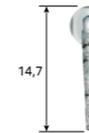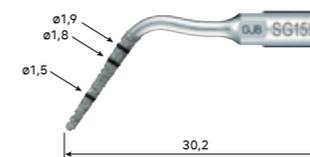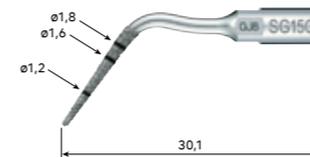

BESTELLCODE
Z305126

BESTELLCODE
Z305127

- Diamant-Beschichtung
- Durchmesser des Spitzenendes 0,9 mm
- Markierungen im Abstand von 5 mm, 10 mm und 12 mm ab Aufsatzspitze

- Diamant-Beschichtung
- Durchmesser des Spitzenendes 1,3 mm
- Markierungen im Abstand von 5 mm, 10 mm und 12 mm ab Aufsatzspitze




Implantatvorbereitung
SG15C, SG15D



IMPLANTATVORBEREITUNG

Für die Erweiterung und Ausarbeitung des Implantatbettes bei Zugang über den Alveolarkamm.

MODELL **SG16A** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 50%

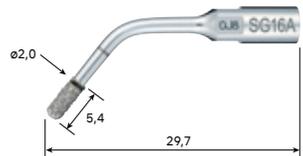

BESTELLCODE

Z305128

- Diamant-Beschichtung • diamantiert; Durchmesser: 2,0 mm
- Markierungen im Abstand von 5 mm und 10 mm ab Aufsatzspitze



Implantatvorbereitung
SG16A

MODELL **SG16B** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 50%



BESTELLCODE

Z305129

- Diamant-Beschichtung • diamantiert; Durchmesser: 2,6 mm
- Markierungen im Abstand von 5 mm und 10 mm ab Aufsatzspitze



Implantatvorbereitung
SG16B



Für die Erweiterung und Ausarbeitung des Implantatbettes bei Zugang über den Alveolarkamm.

IMPLANTATVORBEREITUNG

MODELL **SCL2D** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 50%

INTERNE KÜHLUNG



BESTELLCODE

Z305182

- Diamant-Beschichtung



Die ungefähre Tiefe der Implantatvorbereitungs-Präparation wird anhand der Markierungen am Aufsatz gemessen.



MODELL **SCL4D** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%

INTERNE KÜHLUNG



BESTELLCODE

Z305184

- Diamant-Beschichtung




Ausarbeitung des Implantatbettes
SCL2D, SCL4D

INTERNER SINUSLIFT (KRESTALER ZUGANG)

Für Eingriffe wie die Osteotomie der Kieferhöhle bei Zugang über den Alveolarkamm und Modifikationen des Implantatbettes.

MODELL **SCL1D** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%


INTERNE KÜHLUNG

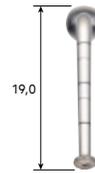

BESTELLCODE
Z305171

MODELL **SCL3D** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%


INTERNE KÜHLUNG

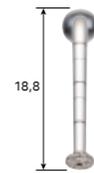

BESTELLCODE
Z305173

MODELL **SCL5D** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%

INTERNE KÜHLUNG

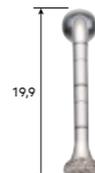

BESTELLCODE
Z305175

• Diamant-Beschichtung

• Diamant-Beschichtung

• Diamant-Beschichtung



Die ungefähre Tiefe der Implantatvorbereitungs-Präparation wird anhand der Markierungen am Aufsatz gemessen.



Ausschneiden des Kavitätenbodens des Implantatbettes

SCL1D, SCL3D, SCL5D




Anheben der Sinusmembran mit interner Spülung bei Zugang über den Alveolarkamm.

INTERNER SINUSLIFT (KRESTALER ZUGANG)

MODELL **SCL1** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 50%


INTERNE KÜHLUNG

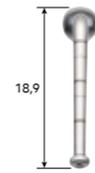

BESTELLCODE
Z305170

MODELL **SCL3** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 50%


INTERNE KÜHLUNG

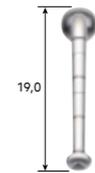

BESTELLCODE
Z305172

MODELL **SCL5** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 50%

INTERNE KÜHLUNG

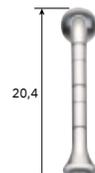

BESTELLCODE
Z305174

• Diamant-Beschichtung

• Diamant-Beschichtung

• Diamant-Beschichtung



Die ungefähre Tiefe der Implantatvorbereitungs-Präparation wird anhand der Markierungen am Aufsatz gemessen.




Vor der Anhebung der Schleimhaut bzw. der Kieferhöhle

SCL1, SCL3, SCL5



MODELL **SG6D** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 80%

MODELL **SG7D** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 50%

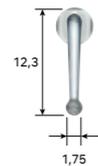

BESTELLCODE
Z305107

BESTELLCODE
Z305108

• Diamant-Beschichtung

• Diamant-Beschichtung



Avulsion von Weisheitszähnen und impaktierten Zähnen
SG6D





Vestibuläres Fenster und präzise Osteoplastik
SG7D

MODELL **SG9** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 50%

MODELL **SG10** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 50%

MODELL **SG11** LEISTUNGSSTUFE **SURG** 50%

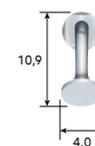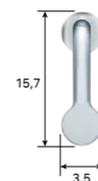

BESTELLCODE
Z305110


BESTELLCODE
Z305111

BESTELLCODE
Z305112


• Elevator, konvex, kreisförmig, flach • Bei 90° abgewinkelt

• Elevator, konvex, kreisförmig, flach • Bei 135° abgewinkelt


• Konischer Kompressor

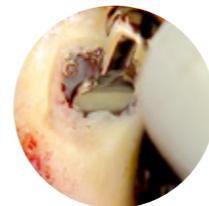

Sinusmembran-Ablösung
SG9, SG10

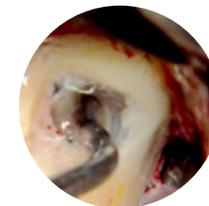

Sinusmembran-Anhebung
SG11

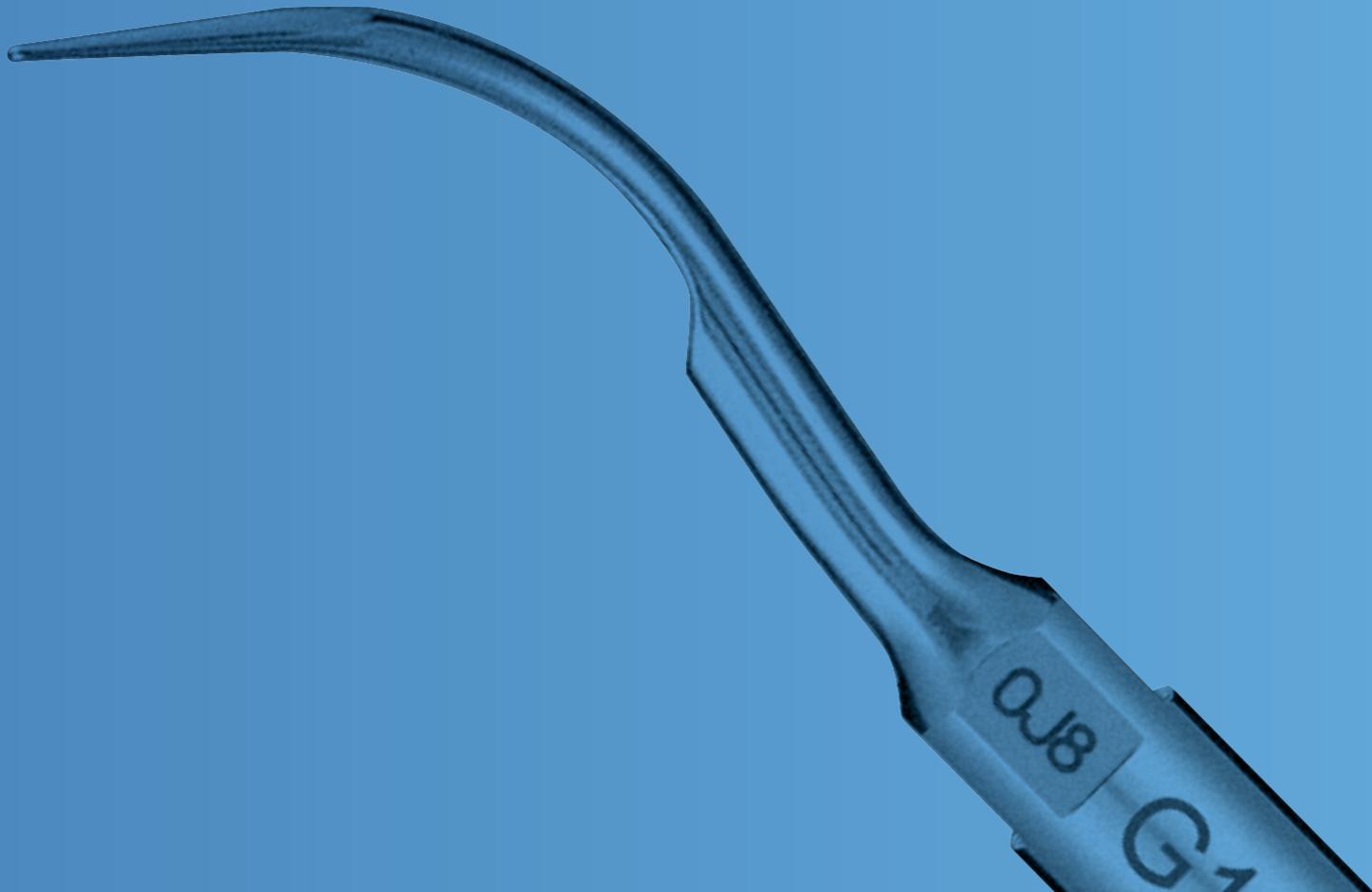

SCALING

SCALING

Entfernung von supragingivalem Zahnstein, Zahnstein in schmalen Interdentalräumen, marginalem gingivalem Zahnstein.

MODELL **G1-S**

LEISTUNGSSTUFE **SURG** 50%



BESTELLCODE

Z305113





Einwurzelig / mehrwurzelig
G1-S

Entfernung von subgingivalem Biofilm. PARODONTOLOGIE

MODELL **P20-S**

LEISTUNGSSTUFE **PERIO** 100%

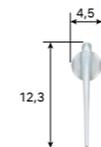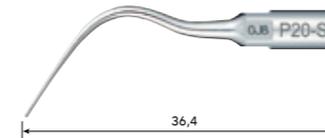

BESTELLCODE


Z305114



Einwurzelig / mehrwurzelig
P20-S

MODELL **P25R-S**

LEISTUNGSSTUFE **PERIO** 100%

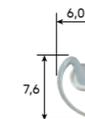

BESTELLCODE

Z305115


* rechtsgebogener Aufsatz*



Einwurzelig / mehrwurzelig
P25R-S, P25L-S

MODELL **P25L-S**

LEISTUNGSSTUFE **PERIO** 100%

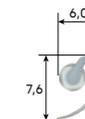

BESTELLCODE

Z305116

* linksgebogener Aufsatz*

*Die Kurvenrichtung der Spitze wird durch die Vorderansicht der Spitze definiert.

MODELL **V10-S**

LEISTUNGSSTUFE **PERIO** 100%

MODELL **V-P10**



Für erhaltende Maßnahmen an Prothesen und Implantaten. Hergestellt aus einem Spezialkunststoff, der eine sichere Reinigung ermöglicht, ohne Schäden an Metallen oder Implantaten hervorzurufen.



BESTELLCODE

Z305117

- beinhaltet Schlüssel zum Wechseln der Aufsätze
- Kunststoff-Aufsatz in Lieferung nicht enthalten.

BESTELLCODE

Y900184

- Packung à 3 St.
- V10-S Aufsatzhalter nicht enthalten



V-P10

MODELL **V-P11R**

MODELL **V-P11L**

MODELL **V-P12**

Doppelt gebogene Aufsätze. Sie sind besonders lang, um schwer erreichbare Mundregionen leichter zu erreichen und um unerwünschten Kontakt zu Nachbarzähnen oder Konturen zu vermeiden.

Eine längere Version des beliebten V-P10-Aufsatzes.



BESTELLCODE

Y1002165

- Packung à 3 St. • rechtsgebogen*
- V10-S Aufsatzhalter nicht enthalten

BESTELLCODE

Y1002166

- Packung à 3 St. • linksgebogen*
- V10-S Aufsatzhalter nicht enthalten

BESTELLCODE

Y1002167

- Packung à 3 St.
- V10-S Aufsatzhalter nicht enthalten




V-P11R, V-P11L



V-P12







■ V-P11R/L, V-P12 können nur für VarioSurg 3 verwendet werden. *Die Kurvenrichtung der Spitze wird durch die Vorderansicht der Spitze definiert.

ENDODONTIE

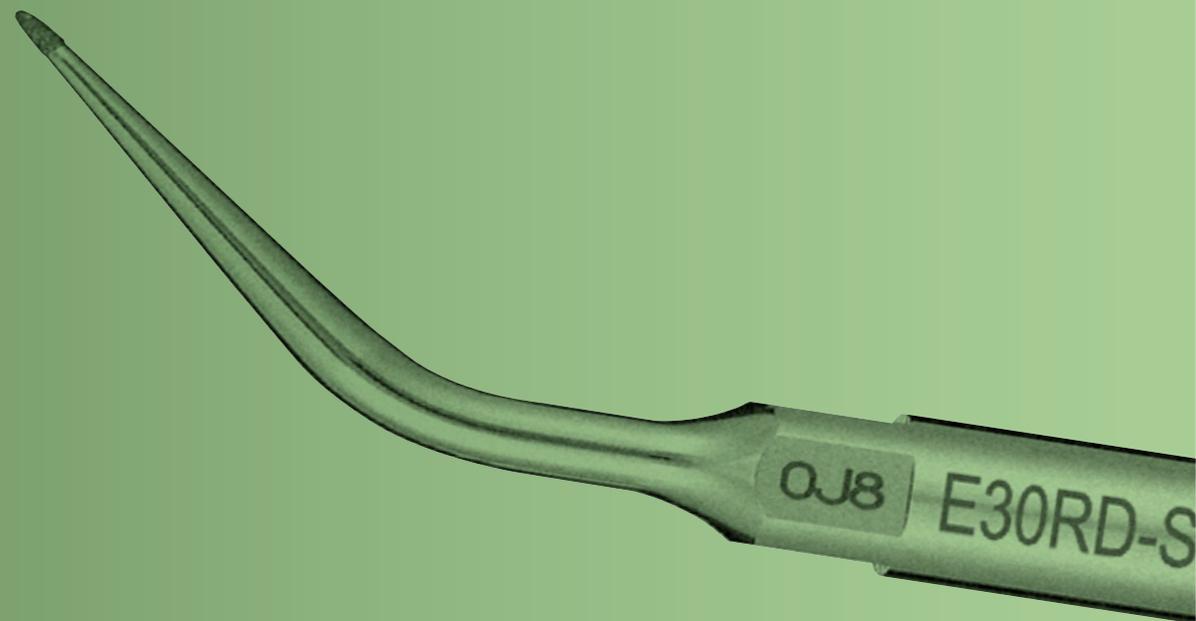

Die mikroskopische Diamantbeschichtung ermöglicht die effektive Entfernung von Dentin am Apex. **ENDODONTIE**

MODELL **E30RD-S** LEISTUNGSSTUFE ENDO 50% MODELL **E30LD-S** LEISTUNGSSTUFE ENDO 50% MODELL **E31D-S** LEISTUNGSSTUFE ENDO 50% MODELL **E32D-S** LEISTUNGSSTUFE ENDO 50%

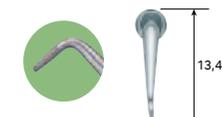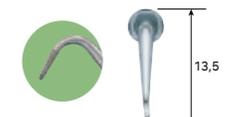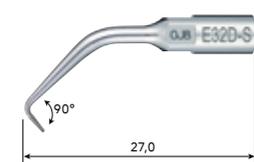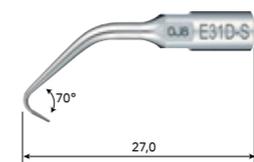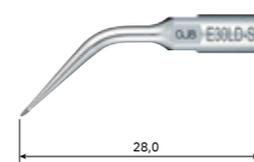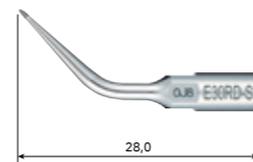

BESTELLCODE

Z305118

BESTELLCODE

Z305119

BESTELLCODE

Z305120

BESTELLCODE


Z305121

- Diamant-Beschichtung
- für Seitenzähne (rechtsgekrümmt*)

- Diamant-Beschichtung
- für Seitenzähne (linksgekrümmt*)

- Diamant-Beschichtung
- für Frontzähne und Molaren (70°)

- Diamant-Beschichtung
- für Frontzähne (90°)

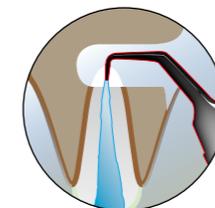

*Die Krümmenrichtung der Spitze wird durch die Vorderansicht der Spitze definiert.



AUFSATZ-SETS

AUFSATZ-SETS

MODELL Basic H-S Set

- Inhalt
- H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11
 - Aufsatzhalter



- KNOCHENCHIRURGIE
- SINUSLIFT
- SCHABER
- SINUSMEMBRAIN-ABLÖSUNG

BESTELLCODE
Y1002775

MODELL Bone Cut Set

- Inhalt
- SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D
 - Aufsatzhalter



KNOCHENCHIRURGIE

BESTELLCODE
Y900688

MODELL Implantat Vorbereitung Set

- Inhalt
- SG15A, SG15B, SG16A, SG16B
 - Aufsatzhalter



IMPLANTATVORBEREITUNG

BESTELLCODE
Y900774

MODELL Interner Sinuslift Set für Normalimplantat

- Inhalt
- SCL1D, SCL2D, SCL1
 - VS-Aufsatzschlüssel • Aufsatzhalter • Gebrauchsanweisung



INTERNER SINUSLIFT (KRESTALLERZUGANG)

BESTELLCODE
Y1002841

MODELL Sinus Lift Set

- Inhalt
- SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11
 - Aufsatzhalter



SINUSLIFT

BESTELLCODE
Y900689

MODELL Endo-S Set

- Inhalt
- G1-S, E30RD-S, E30LD-S, E31D-S, E32D-S
 - Aufsatzhalter



ENDODONTIE

BESTELLCODE
Y900691

MODELL Interner Sinuslift Set für große Implantate

- Inhalt
- SCL2D, SCL3D, SCL4D, SCL3
 - VS-Aufsatzschlüssel • Aufsatzhalter • Gebrauchsanweisung



INTERNER SINUSLIFT (KRESTALLERZUGANG)

BESTELLCODE
Y1002842

VarioSurg 3

Vorteile

- Superschlankes Handstück mit LED
- Umfangreiches Aufsatzsortiment für verschiedenste Anwendungen
- Mit Implantmotor Surgic Pro2 oder Surgic Pro koppelbar (mit Link-System)



Komplettset

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	VarioSurg3 (230V)	Y1002726

Inhalt

- Steuereinheit • LED-Handstück mit 2 m Kabel • FC-78 Fußsteuerung
- Sterilisations-Kassette • Handstückhalter
- Kühlmittelschläuche (5 Stück) und weiteres Zubehör
- Basis H-S Aufsatzset (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 und Aufsatzhalter)

Komplettset ohne Fußsteuerung (zur Kopplung mit Surgic Pro2 oder Surgic Pro)

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	VarioSurg3 (230V) Non FT	Y1002248

Inhalt

- Steuereinheit • LED-Handstück mit 2 m Kabel • Sterilisations-Kassette
- Handstückhalter • Kühlmittelschläuche (5 Stück) und weiteres Zubehör
- Basis H-S Aufsatzset (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 und Aufsatzhalter)

Technische Daten (Steuereinheit)

- Frequenz : 28-32 kHz
- Stromversorgung : 230 V 50/60Hz
- Kühlmittel : 10-75 ml/min
- Programme : SURG × 5, ENDO × 2, PERIO × 2
- Abmessungen : B 265 × T 220 × H 100 mm

NAKANISHI INC. www.nsk-dental.com
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

NSK Europe GmbH www.nsk-europe.de
Elly-Beinhorn-Strasse 8, 65760 Eschborn, Germany

Änderungen vorbehalten.