


NSK

CREATE IT.

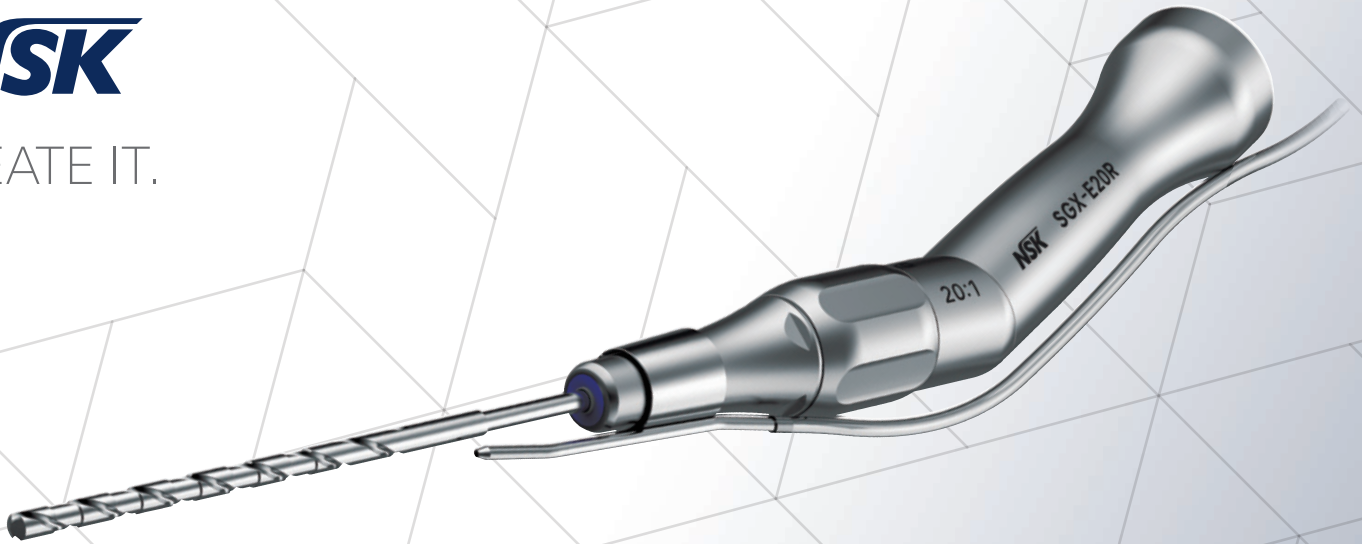

SGX-E20R

HANDSTÜCK FÜR ZYGOMATIC IMPLANTATE

Eine einfache und effiziente Lösung für Zygomatic Implantate

Durch seine einzigartige Geometrie, die speziell auf die Anforderungen beim Setzen von Zygomatic Implantaten ausgerichtet ist, macht das SGX-E20R Handstück diese Therapieform einfacher und effizienter. NSK's Dichtungssystem an der Instrumentenspitze verhindert das Eindringen von Partikeln und Kontamination. Die glatte, geschmeidige Oberfläche des Handstücks erleichtert die hygienische Aufbereitung.

Genau der richtige Winkel für Zygomatic Implantate


Verglichen mit einem konventionellen Winkelstück ist das SGX-E20R so abgewinkelt, dass es außerordentlich komfortablen Zugang zum Jochbein (os zygomaticum) erlaubt und dabei gute Sichtverhältnisse bietet.





Effiziente Kühlung durch externe Kühlmittelversorgung

Die effiziente Kühlung von Bohrer und Implantationsfeld wird über einen außenliegenden Kühlmitteladapter sichergestellt.

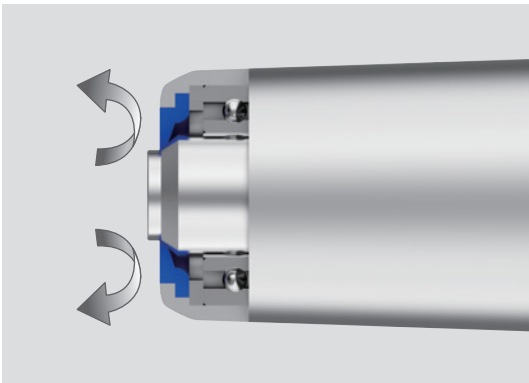

Original NSK Dichtsystem

Die spezielle Dichtung verhindert zuverlässig das Eindringen von Kontamination ins Innere des SGX-E20R. So wird die hygienische Aufbereitung erleichtert und die Lebensdauer des Instruments erhöht.

20:1 Reduzierung

OHNE LICHT MODELL : **SGX-E20R** BESTELLCODE : **HA1200**

- Edelstahl-Körper ● Max. Geschwindigkeit : 2,000 min⁻¹
- Max. Drehmoment : 50 Ncm ● Dreh-Spannmechanismus
- Abgewinkeltes Handstück ● Externe Kühlung
- Für die Implantatbett-Präparation und das Setzen von Zygomatic Implantaten in der maxillofazialen und Oralchirurgie



Waschbar im Thermodesinfektor



Autoklavierbar

NAKANISHI INC. www.nsk-dental.com

700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan TEL: +81 289 64 3380 FAX: +81 289 62 5636

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Strasse 8
65760 Eschborn, Germany
TEL: +49 6196 77606 0
FAX: +49 6196 77606 29

NSK France S.A.S.

32 rue de Lisbonne
75008 Paris, France
TEL: +33 1 56 79 59 80
FAX: +33 1 56 79 59 81

NSK United Kingdom Ltd.

Office 4, Gateway 1000, Arlington Business Park
Whittle Way, Stevenage, SG1 2FP, UK
TEL: +44 1438 310670
FAX: +44 1438 310671

NSK Dental Spain S.A.

C/Módena, 43 El Soho-Európolis
28232 Las Rozas de Madrid, Spain
TEL: +34 91 626 61 28
FAX: +34 91 626 61 32

NSK Dental Italy S.r.l.

Via dell'Agricoltura 21
36016 Thiene VI, Italy
TEL: +39 0445 820070
EMAIL: info@nsk-italy.it