

RESTAURATION & PROTHETIK



RESTAURATION & PROTHETIK

Create it 

NSK

INHALT

Turbineninstrumente

Technologie & Funktion	03 - 04
Ti-Max Z	05 - 07
S-Max M	08
S-Max pico	09
Ti-Max X450	10
Pana-Max PLUS	11
Pana-Max2	12
NSK Kupplungen	13 - 14

Hand- & Winkelstücke

Technologie & Funktion	15 - 16
Ti-Max Z	17 - 20
Ti-Max Z45L	21
Ti-Max nano	22
Ti-Max X	23 - 24
S-Max M	25 - 26
FX Serie	27 - 28
EX Serie / isoE-LUX	29 - 30

Mikromotoren / Luftmotoren

NLZ E / NLZ Endo	31
Ti-Max X205L / S-Max M205 / FX205m	32

Ersatzteile	33 - 34
-------------------	---------

NSK TECHNOLOGIE & FUNKTION

Push-Selbstspannfutter

Das Ultra-Push-System ist der original NSK Druckknopf-Selbstspannmechanismus, der während der Rotation den Bohrergrip anzieht. Es erlaubt einfachstes Einsetzen und Entnahme des Bohrers ohne Werkzeug. Mit zunehmender Belastung erhöht sich die Rückhaltekraft des Spannsystems.

Keramik-Kugellager

Kugellager aus Keramik sind 25 % härter als herkömmliche Kugellager aus Stahl, wiegen aber nur rund die Hälfte. Die Abnutzung durch Friktion ist bei Keramikugellagern und den entsprechenden Kugellagerkäfigen deutlich vermindert, wodurch Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Turbinenläufer erhöht werden.

Autoklavierbar

Alle NSK Instrumente bieten auch bei häufiger Sterilisation Langlebigkeit und starke Leistung. Alle Instrumente können im Autoklaven bis 135°C sterilisiert werden.

Thermodesinfizierbar

Zur verbesserten Infektionsvermeidung wird die Thermodesinfektion empfohlen. Entsprechend markierte NSK Instrumente können im Thermodesinfektor gereinigt und desinfiziert werden.

DURAGRIP

Die besondere Oberflächenbeschichtung ist sowohl rutschfest als auch kratzfest. Dadurch wird die Haltbarkeit deutlich erhöht und gleichzeitig ein sehr angenehmer Griffkomfort gewährleistet.

DURACOAT

Die gleichmäßige Oberflächenbeschichtung sorgt für eine angenehme Haptik und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Abnutzung.

Mikrofilter

Der Mikrofilter mit 0,3 mm großen Öffnungen hält Partikel, die zur Blockade des Spraysystems führen könnten, aus diesem fern und stellt eine angemessene Kühlung sicher.

Zellglasoptik

Die NSK-Zellglasoptik überträgt brillante Beleuchtung, ist sehr langlebig und wird selbst durch wiederholtes Autoklavieren nicht beeinträchtigt.

Clean-Head-System


Das Clean-Head-System verfügt über einen Mechanismus, der das Rücksaugen von Blut, Mundflüssigkeiten und Fremdkörpern in den Instrumentenkopf verhindert. Neben den hygienischen Vorteilen, werden auch Kugellager und mechanische Bauteile vor diesen externen Einflüssen geschützt und bleiben länger haltbar.

Vierfach-Wasserstrahl

Der NSK Vierfach-Wasserstrahl ist einer der effektivsten seiner Art und sorgt für optimale Kühlung des gesamten Behandlungsfeldes.

Rücksaugstopp

Dieses Ventil verhindert zuverlässig das Eindringen von kontaminiertem Wasser in die Wasserleitungen.

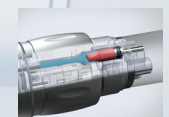

Ti-Max Z

Turbineninstrumente




Beispiellose Durchzugskraft

Erleben Sie die phänomenale Durchzugskraft der 44W starken Turbine, die eine beispiellose Schneidkraft bietet.
Die neue Turbinenserie erleichtert zeitaufwändige Arbeiten - wie zum Beispiel das Entfernen von Zirkonoxid - und verkürzt die Behandlungsdauer auch für den Patienten spürbar.
Eine neue Zeitrechnung beginnt.

DYNAMIC POWER SYSTEM

Das neue „DYNAMIC POWER SYSTEM“* bietet ein revolutionäres Schnittgefühl. Neben der vergrößerten Auslassöffnung, der optimierten Düsenstruktur und der vergrößerten Rotorscheufel wird Edelstahl (dreimal schwerer als Aluminium) für die Rotoren verwendet, um die höchste Rotationskraft in dieser Klasse zu erreichen.

*Nur Z990L / Z890L

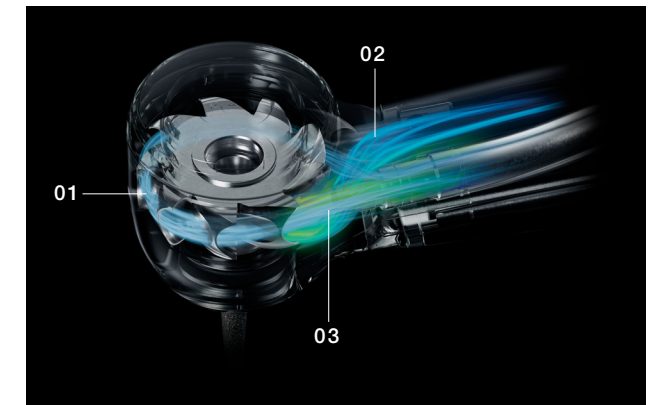

01. Erweiterte Rotorblatt-Oberfläche

Die Lufteinwirkungsfläche ist doppelt so groß wie bei herkömmlichen Modellen. Die mit großen Einbuchtungen durchsetzte Oberfläche nimmt den Luftstrom verlustfrei auf, um ein hohes Drehmoment zu erreichen.

02. Erweiterte Rückluftkerbe


Die vergrößerte Rückluftkerbe leitet die von der Schaufel aufgenommene Luft schnell ab. Der vereinfachte Rückluftfluss verbessert das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich.

03. Erweiterte zylindrische Düse

Die optimierte Düsenstruktur sorgt für einen gut angepassten Luftstrom. Luftkraft wird mit hohem Wirkungsgrad in Rotationskraft umgewandelt.

Leichtes Titangehäuse und 100° Kopfwinkel

Die interne Struktur wurde überarbeitet, um das Gewicht im Vergleich zum Vorgängermodell um 16 % zu reduzieren. Unter Berücksichtigung der physiologischen Spezifikation der Mundhöhle (Spee-Kurve und Wilson-Kurve), ermöglicht der um 100° abgewinkelte Kopf einen optimalen Zugang und ein drehmomentstarkes Schneiden für eine effiziente Behandlung in der Mundhöhle.

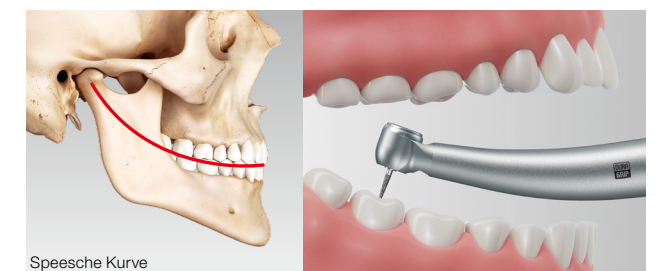

Speesche Kurve

Vergleich mit dem vorherigen Modell




Z890L: 100°
Z800L: 94°

SICHERHEIT UND INFEKTIONSKONTROLLE


Der Quick-Stop-Mechanismus, der die Hochgeschwindigkeitsrotation in ca. 1 Sekunde stoppt, ist an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Kopfes angebracht. Die beiden Quick-Stopper verhindern die Trägheitsrotation und verringern damit das Risiko einer Rücksaugung von Flüssigkeiten, wodurch eine äußerst sichere Behandlung gewährleistet wird.

*Die beiden Quick-Stop-Funktionen nur bei Z990L / Z890L.

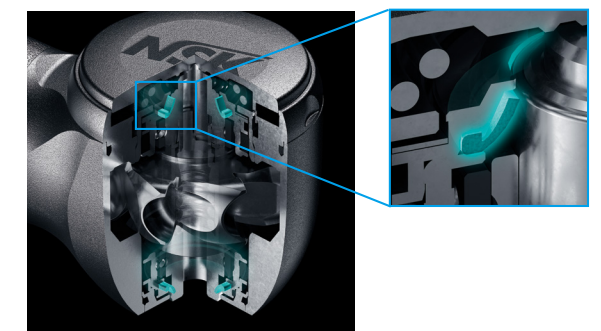

Bei Unterbrechung der Luftzufuhr tritt das Stoppererelement mit der rotierenden Welle in Kontakt und übt eine Bremswirkung aus. Durch den an der Vorder- und Rückseite des Kopfes angebrachten Stopper wird der Kontakt erhöht, sodass die Rotation abrupt gestoppt werden kann.

Ti-Max Z

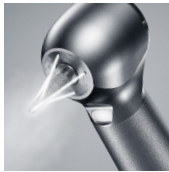

100° Kopfwinkel
Titankörper mit kratzfester
DURAGRIP-Beschichtung
Keramik-Kugellager
Zellglasoptik
Push-Selbstspannfutter
Vierfach-Spraykühlung
Clean-Head-System
Quick-Stop-Funktion
Mikrofilter*
DYNAMIC POWER SYSTEM*
DURAPOWER CHUCK*
Einfacher Rotorwechsel
*Nur Z990L / Z890L



Micro-Kopf
• Leistung : 20 W
• Geschwindigkeit : 380.000-450.000/min⁻¹
• Kopfgröße : ø9,0 x H 10,8 mm



Mini-Kopf
• Leistung : 41 W
• Geschwindigkeit : 320.000-400.000/min⁻¹
• Kopfgröße : ø10,6 x H 10,8 mm



Standard-Kopf
• Leistung : 44 W
• Geschwindigkeit : 280.000-360.000/min⁻¹
• Kopfgröße : ø12,1 x H 12,7 mm

NSK Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Micro	●	Z micro	PA2357
Mini	●	Z890L	PA23720001
Standard	●	Z990L	PA23730001

KaVo® Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Micro	●	Z micro KL	PA2358
Mini	●	Z890KL	PA23740001
Standard	●	Z990KL	PA23750001

Dentsply Sirona® Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Micro	●	Z micro SL	PA2359
Mini	●	Z890SL	PA23760001
Standard	●	Z990SL	PA23770001

W&H® Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Micro	●	Z micro WL	PA23610001
Mini	●	Z890WL*	PA23860001
Standard	●	Z990WL*	PA23870001

*Lichtquelle integriert

Bien Air® Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Mini	●	Z890BL*	PA23840001
Standard	●	Z990BL*	PA23850001

*Lichtquelle integriert

S-Max M



Edelstahlkörper
Keramik-Kugellager
Push-Selbstspannfutter
Vierfach-Wasserstrahl
Clean-Head-System
Zellglasoptik
Einfacher Rotorwechsel



Mini-Kopf
• Leistung : 23 W
• Geschwindigkeit : 380.000-450.000/min⁻¹
• Kopfgröße : ø10,6 x H 12,4 mm



Standard-Kopf
• Leistung : 26 W
• Geschwindigkeit : 325.000-430.000/min⁻¹
• Kopfgröße : ø12,1 x H 13,3 mm

NSK Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Mini	●	M800L	P1253
Mini	—	M800	P1255
Standard	●	M900L	P1254
Standard	—	M900	P1256

KaVo® Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Mini	●	M800KL	P1257
Standard	●	M900KL	P1258
Standard	—	M900K	P1259

Dentsply Sirona® Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Mini	●	M800SL	P1261
Standard	●	M900SL	P1262

W&H® Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Mini	●	M800WL*	P1265
Standard	●	M900WL*	P1266
Standard	—	M900W	P1287

*Lichtquelle integriert

Bien Air® Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Mini	●	M800BL*	P1263
Standard	●	M900BL*	P1264

*Lichtquelle integriert



S-Max pico



Edelstahlkörper
Keramik-Kugellager
Push-Selbstspannfutter
Einfach-Wasserstrahl
Clean-Head-System
Zellglasoptik



- Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min⁻¹
- Kopfgröße : ø8,6 x H 9,0 mm
- nur für Kurzschaft-/Ultrakurzschaft-Bohrer mit max. 18,5 mm Länge

NSK Kupplungen


Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	S-Max pico	P1140

KaVo® Kupplungen

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	S-Max pico KL	P1142

Bohrersortiment

MODELL	BESTELLCODE
PC1 • Packung à 3 St.	Y1001817
PC2 • Packung à 3 St.	Y1001818
PC3 • Packung à 3 St.	Y1001819
PC3ff • extrafeine Körnung • Packung à 3 St.	Y1002019
PC4 • Packung à 3 St.	Y1001820

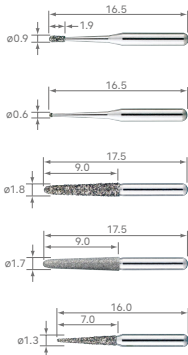


Bien Air® Kupplungen

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	S-Max pico BLED*	P1144

*Lichtquelle integriert

MODELL	BESTELLCODE
PC4ff • Extrafeine Körnung • Packung à 3 St.	Y1002020
PC5 • Packung à 3 St.	Y1001821
PC5ff • Extrafeine Körnung • Packung à 3 St.	Y1002021
PC6 • Packung à 3 St.	Y1001822
PC6ff • Extrafeine Körnung • Packung à 3 St.	Y1002022

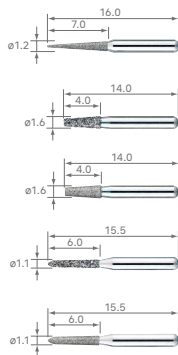

Ti-Max X450



Titankörper mit kratzfester
DURACOAT-Beschichtung
Keramik-Kugellager
Push-Selbstspannfutter
Dreifach-Wasserstrahlkühlung
Clean-Head-System
Zellglasoptik



- Leistung : 21 W
- Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min⁻¹
- Kopfgröße : ø11.2 x H 13.5 mm
- 45°-Winkel-Kopf
- für FG-Bohrer mit max. 25 mm Länge

NSK Kupplungen

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	X450L	P1078

KaVo® Kupplungen

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	X450KL	P1079

Dentsply Sirona® Kupplungen

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	X450SL	P1080

Bien Air® Kupplungen

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	X450BLED*	P1081

*Lichtquelle integriert

Pana-Max PLUS



Edelstahlkörper
Keramik-Kugellager Push-Selbstspannfutter
Vierfach-Wasserstrahl
Clean-Head-System
Rücksaugstopp
Ventil zur Regulation des Luftdrucks



Mini-Kopf
• Geschwindigkeit : 380,000-450,000 min⁻¹
• Kopfgröße : ø10.6 x H 12.4 mm



Standard-Kopf
• Geschwindigkeit : 340,000-410,000 min⁻¹
• Kopfgröße : ø12.1 x H 13.3 mm

Midwest-4-Loch (Direktanschluss-Modelle) 			
Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Mini	—	PAP-MU M4	P1021
Standard	—	PAP-SU M4	P1022

Borden-2-Loch (Direktanschluss-Modelle) 			
Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Mini	—	PAP-MU B2	P1023
Standard	—	PAP-SU B2	P1024

Pana-Max2



Edelstahlkörper
Keramik-Kugellager
Push-Selbstspannfutter
Einfach-Wasserstrahl
Clean-Head-System
Rücksaugstopp ^(M4/B2)
Ventil zur Regulation des Luftdrucks ^(M4/B2)



• Geschwindigkeit : 350,000-450,000 min⁻¹
• Kopfgröße : ø11.2 x H 13.4 mm



• Geschwindigkeit : 350,000-450,000 min⁻¹
• Kopfgröße : ø11.2 x H 13.4 mm

NSK Kupplungen		
Licht	MODELL	BESTELLCODE
—	Pana-Max2 PTL	P1211

KaVo® Kupplungen		
Licht	MODELL	BESTELLCODE
—	Pana-Max2 KV	P1212

Midwest-4-Loch (Direktanschluss-Modelle) 		
Licht	MODELL	BESTELLCODE
—	Pana-Max2 M4	P1154

Borden-2-Loch (Direktanschluss-Modelle) 		
Licht	MODELL	BESTELLCODE
—	Pana-Max2 B2	P1155

NSK Kupplungen



Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	PTL-CL-LED	P1001600

- massiver Titankörper
- Rücksaugstopp
- für NSK
- LED in Kupplung integriert



Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	KCL-LED	P1005600

- massiver Titankörper
- Rücksaugstopp
- für KaVo® MULTIflex® LUX mit Wassermengenregler
- LED in Kupplung integriert



Licht	MODELL	BESTELLCODE
—	FM-CL-M4	P434051

- Edelstahlkörper
- Rücksaugstopp
- für NSK



Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	PTL-CL-LED III	P1001601

- massiver Titankörper
- Rücksaugstopp
- für NSK mit Wassermengenregler
- LED in Kupplung integriert



Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	SCL-LED	P1009600

- massiver Titankörper
- Rücksaugstopp
- für Sirona® Quick Kupplung mit Wassermengenregler
- LED in Kupplung integriert



Licht	MODELL	BESTELLCODE
—	FM-CL-B2/B3	P432051

- Edelstahlkörper
- Rücksaugstopp
- für NSK

Turbinen-/Kupplungskompatibilität je Serie

	NSK (Mit Licht)	NSK (Ohne Licht)	KaVo® (Mit Licht)	KaVo® (Ohne Licht)	Dentsply Sirona®	W&H® (Mit Licht)	W&H® (Ohne Licht)	Bien Air®
Ti-Max Z	○	—	○	—	○	○	—	○
S-Max M	○	○	○	○ (M900K)	○	○	○ (M900W)	○
S-Max pico	○	—	○	—	○	○	—	○
Ti-Max X450	○	—	○	—	○	○	—	○
Pana-Max2	—	○	—	○	—	—	—	—
Kupplungstyp	 NSK Kupplungen (PTL Typ) LED		 KaVo® Multiflex® LED		 Sirona® Quick Kupplung LED	 W&H® Roto Quick®		 Bien Air® UNIFIX®

Hand- & Winkelstücke

NSK TECHNOLOGIE & FUNKTION

Anti-Erhitzungssystem

Das NSK-eigene Anti-Erhitzungssystem reduziert die Entwicklung von Hitze in signifikantem Umfang.

Push-Selbstspannfutter

Das Ultra-Push-System ist der original NSK Druckknopf-Selbstspannmechanismus, der während der Rotation die Haltekraft erhöht. Es erlaubt einfachstes Einsetzen und Entnahme des Bohrers ohne Werkzeug. Mit zunehmender Belastung erhöht sich die Haltekraft des Spannsystems.

Keramik-Kugellager

Kugellager aus Keramik sind 25 % härter als herkömmliche Kugellager aus Stahl, wiegen aber nur rund die Hälfte. Die Abnutzung durch Friktion ist bei Keramikugellagern und den entsprechenden Kugellagerkäfigen deutlich vermindert, wodurch Leistungsfähigkeit und Lebensdauer erhöht werden.

Zellglasoptik

Die NSK-Zellglasoptik überträgt brillante Beleuchtung, ist sehr langlebig und wird selbst durch wiederholtes Autoklavieren nicht beeinträchtigt.

Clean-Head-System

Das Clean-Head-System verfügt über einen Mechanismus, der das Rücksaugen von Blut, Mundflüssigkeiten und Fremdkörpern in den Instrumentenkopf verhindert. Neben den hygienischen Vorteilen, werden auch Kugellager und mechanische Bauteile vor diesen externen Einflüssen geschützt und bleiben länger haltbar.

Vierfach-Wasserstrahl

Der NSK Vierfach-Wasserstrahl ist einer der effektivsten seiner Art und sorgt für optimale Kühlung des gesamten Behandlungsfeldes.

Autoklavierbar

Alle NSK Instrumente bieten auch bei häufiger Sterilisation Langlebigkeit und starke Leistung. Alle Instrumente können im Autoklaven bis 135° sterilisiert werden.

Thermodesinfizierbar

Zur verbesserten Infektionsvermeidung wird die Thermodesinfektion empfohlen. Entsprechend markierte NSK Instrumente können im Thermodesinfektor gereinigt und desinfiziert werden.

DURAGRIP

Die besondere Oberflächenbeschichtung ist sowohl rutschfest als auch kratzfest. Dadurch wird die Haltbarkeit deutlich erhöht und gleichzeitig ein sehr angenehmer Griffkomfort gewährleistet.

DURACOAT

Die gleichmäßige Oberflächenbeschichtung sorgt für eine angenehme Haptik und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Abnutzung.

Mikrofilter


Der Mikrofilter mit 0,3 mm großen Öffnungen hält Partikel, die zur Blockade des Spraysystems führen könnten, aus diesem fern und stellt eine angemessene Kühlung sicher.

Höchste Laufruhe und minimale Vibration

Die Verwendung mikropräziser Teile und Getriebezähne reduziert Geräuschentwicklung und Vibration.

Rücksaugstopp

Dieses Ventil verhindert zuverlässig das Eindringen von kontaminiertem Wasser in die Wasserleitungen.

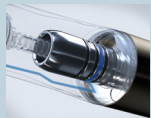

Ti-Max Z
Winkelstücke

Der ultimativ
gleichmäßige Schnitt.
Entwickelt
für Langlebigkeit.



Das Ti-Max Z99L ist NSKs Flaggschiff unter den Winkelstücken –
kompromisslose Qualität für höchste Ansprüche in Zahnarztpraxen.
Die neueste Generation von Spannzange und Getriebe optimiert auf Basis
sorgfältigster Verfeinerungen Haltbarkeit, Haltekraft und Schneidleistung
für ein unübertroffenens Behandlungserlebnis.


100° abgewinkelter Kopf –
für einfachen Zugang

Das Design des Z99L Winkelstücks orientiert sich an der
natürlichen Anatomie der Mundhöhle (Spee-Kurve und Wilson-
Kurve) und ermöglicht das Schneiden mit hohem Drehmoment
für eine effizientere Behandlung.



Optimiertes Getriebedesign
- für ein sanftes Schneiden

Das Winkelstück verfügt über eine optimierte interne
Struktur mit der idealen Anzahl und Form von Zahnrädern
für eine effizientere Kraftübertragung. Dadurch wird
das Motordrehmoment noch besser übertragen und
geschmeidigeres Arbeiten ermöglicht.

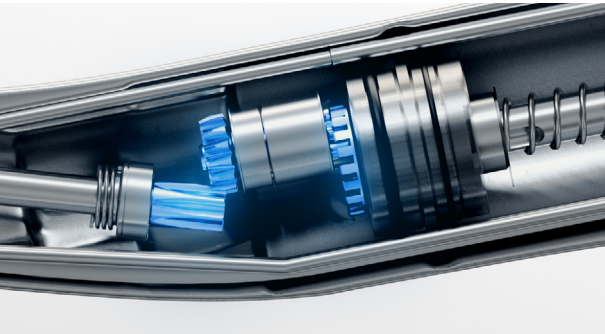

Zwei-Wege-Kühlfunktion
(Z99L, Z95L, Z45L, Z15L)

Die weltweit erste Zwei-Wege-Sprayregulierung ermöglicht die
Umschaltung zwischen Spraynebel und Wasserstrahl, je nach
Behandlungssituation und -verfahren. Der Wasserstrahl verhindert
subkutane Emphyseme bei chirurgischen Verfahren, während der
Spraynebel das Werkzeug wirksam kühlt.



Table with 4 columns: Übersetzungsverhältnis, Licht, MODELL, BESTELLCODE. Row 1: 1:5 Übersetzung, [dot], Z99L, CA13140001.

- maximale Geschwindigkeit 200.000 min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6)
- 100°-Kopfwinkel
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- DURAPOWERC HUCK
- Keramik-Kugellager
- Kühlfunktion: 4 Düsen mit Zwei-Wege-Kühlfunktion
- Mikrofilter
- Anti-Erhitzungssystem
- Clean-Head-System
- Glasstab-Lichtleiter



Maximaler Komfort

Kleiner Kopf
Extrem geräusch- und vibrationsarm

Ti-Max Z95L

Der kleinste Kopf*

Der Kopf ist um 2° mehr geneigt als beim X95L, was eine viel bessere Sichtbarkeit und Zugänglichkeit selbst für Molaren und andere schwer behandelbare Bereiche ermöglicht.


*Vergleichen Sie mit unserem vorherigen Modell und den Produkten anderer Hersteller.

Der schlankste Hals

Durch die Verschlanung des Halsteils wurde die Sicht im Vergleich zu herkömmlichen Produkten wesentlich verbessert und dadurch ein weites Operationsfeld für unterschiedlichste Behandlungen geschaffen.

Einfacher Zugang

Der verschlankte Körper des Winkelstücks ermöglicht selbst bei Behandlungen im molaren Bereich einen optimalen Zugang, ohne dabei mit den Frontzähnen in störenden Kontakt zu geraten.

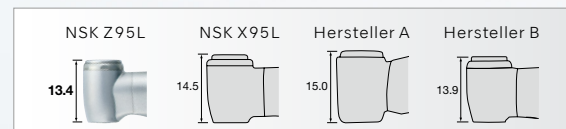

Ti-Max Z



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:5 - Übersetzung	●	Z95L	C1034

- max. Geschwindigkeit: 200.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter
- Vierfach-Wasserstrahl (Zwei-Wege-Kühlfunktion)
- Keramik-Kugellager
- Mikrofilter
- Anti-Erhitzungssystem
- Clean-Head-System
- Zellglasoptik

Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:5 - Übersetzung	●	Z85L	C1062

- Mini-Kopf
- max. Geschwindigkeit: 200.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)*
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter
- Einfach-Wasserstrahl
- Keramik-Kugellager
- Mikrofilter
- Anti-Erhitzungssystem
- Clean-Head-System
- Zellglasoptik
- *für Kurzschaftbohrer

Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:1 - Übertragung	●	Z25L	C1038

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter
- Einfach-Wasserstrahl (Zwei-Wege-Kühlfunktion)
- Mikrofilter
- Clean-Head-System
- Zellglasoptik

Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	●	Z24L	C1126

- Mini-Kopf
- max. Geschwindigkeit: 40.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter
- Einfach-Wasserstrahl
- Mikrofilter
- Zellglasoptik

Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
4:1-Untersetzung	●	Z15L	C1039

- max. Geschwindigkeit: 10.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Mikrofilter
- Clean-Head-System
- Zellglasoptik
- Push-Selbstspannfutter
- Einfach-Wasserstrahl (Zwei-Wege-Kühlfunktion)

Ti-Max Z45L



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:4,2-Übersetzung	●	Z45L	C1064
• max. Geschwindigkeit: 168.000/min⁻¹ • für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm) • 45°-Kopfwinkel • Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung • Keramik-Kugellager • Push-Selbstspannfutter • Vierfach-Wasserstrahl (Zwei-Wege-Kühlfunktion) • Mikrofilter • Anti-Erhitzungssystem • Clean-Head-System • Zellglasoptik			

Verbesserter Zugang



Der um 45 Grad abgewinkelte Kopf erleichtert den Zugang zum molaren Bereich, ohne dass das Instrument mit Frontzähnen oder angrenzenden Molaren in Konflikt gerät.

Zwei-Wege-Kühlfunktion (Z99L, Z95L, Z45L, Z15L)



Die weltweit erste Zwei-Wege-Sprayregulierung ermöglicht die Umschaltung zwischen Spraynebel und Wasserstrahl, je nach Behandlungssituation und -verfahren.

Optimaler Zugang in unterschiedlichsten klinischen Situationen

Sektionieren eines impaktierten Weisheitszahnes



Dank des zusätzlichen Raums, den der schlanke Ti-Max Z45L zwischen den Frontzähnen schafft, können Sie eine bequeme Fingerauflage ohne Belastung erreichen. Außerdem ist es einfach, den Bohrer in einem optimalen Winkel zu halten und präzise Schnitte durchzuführen, selbst wenn die Arbeitstiefe nahe der Wurzelspitze liegt.

Zervikale Kariesentfernung bei einem linken oberen Schneidezahn




Die sichere Fingerauflage auf einem Frontzahn ermöglicht stabiles Beschleifen ohne Störung durch andere Zähne. Da der Winkel des Bohrers frei kontrollierbar ist, sind auch minimal invasive Interventionen möglich.

Palatinale Kariesentfernung an einem linken zweiten Prämolaren im Oberkiefer




Beim Arbeiten auf der Gaumenseite eines zweiten Prämolaren ermöglicht Ti-Max Z45L behutsames Behandeln und gewährleistet ausreichenden Arbeitsraum zu den angrenzenden Backenzähnen des Oberkiefers.

Freilegung der Pulpenkammer an einem rechten zweiten Prämolaren im Unterkiefer

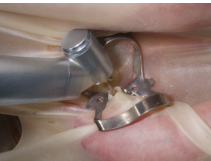

Ti-Max Z45L ermöglicht reibungslose Präparation, ohne durch die Kofferdamklammer gestört zu werden. Seine Flexibilität macht Behandlungen sicherer und präziser.

Ti-Max nano

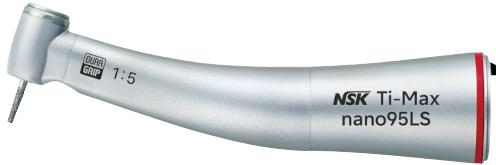

Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:5-Übersetzung	●	nano95LS	C1099
• max. Geschwindigkeit: 200.000/min⁻¹ • für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm) • Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung • Push-Selbstspannfutter • Vierfach-Wasserstrahl • Keramik-Kugellager • Mikrofilter • Anti-Erhitzungssystem • Clean-Head-System • Zellglasoptik			



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	●	nano25LS	C1100
• max. Geschwindigkeit: 40.000/min⁻¹ • für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm) • Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung • Push-Selbstspannfutter • Einfach-Wasserstrahl • Mikrofilter • Clean-Head-System • Zellglasoptik			



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
4:1-Untersetzung	●	nano15LS	C1101
• max. Geschwindigkeit: 10.000/min⁻¹ • für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm) • Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung • Push-Selbstspannfutter • Einfach-Wasserstrahl • Mikrofilter • Clean-Head-System • Zellglasoptik			

Gerades Handstück



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	●	nano65LS	H1048
• max. Geschwindigkeit: 40.000/min⁻¹ • für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm) • für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)* • Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung • Einfach-Wasserstrahl • Clean-Head-System • Zellglasoptik * (nur) mit eingesetztem Bohrerstopper			

Ti-Max X



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:5-Übersetzung	●	X95L	C600
1:5-Übersetzung	—	X95	C610

- max. Geschwindigkeit: 200.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter
- Keramik-Kugellager
- Vierfach-Wasserstrahl
- Mikrofilter
- Anti-Erhitzungssystem
- Clean-Head-System
- Zellglasoptik



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	●	X25L	C601
1:1-Übertragung	—	X25	C611

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtu
- Push-Selbstspannfutter
- Einfach-Wasserstrahl
- Mikrofilter
- Clean-Head-System
- Zellglasoptik



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
4:1-Untersetzung	●	X15L	C602
4:1-Untersetzung	—	X15	C612

- max. Geschwindigkeit: 10.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter
- Einfach-Wasserstrahl
- Mikrofilter
- Clean-Head-System
- Zellglasoptik

Externe Wasserzufuhr

Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:5-Übersetzung	—	X95EX	C1072

- max. Geschwindigkeit: 200.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter
- Keramik-Kugellager
- Vierfach-Wasserstrahl
- Clean-Head-System



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
10:1-Untersetzung	●	X35L	C620
10:1-Untersetzung	—	X35	C624

- max. Geschwindigkeit: 4.000/min⁻¹
- 60° Vorwärts-/Rückwärtsdrehung
- für Handfeilen und Feilen mit Winkelstückschaft
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter
- Einfach-Wasserstrahl
- Mikrofilter
- Zellglasoptik



MODELL	BESTELLCODE
QF Adaptor	C877701



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
16:1-Untersetzung	●	X57L	C609
16:1-Untersetzung	—	X57	C619

- max. Geschwindigkeit: 2.500/min⁻¹
- für Schraubkelche und -bürsten
- Spezielles Dichtsystem verhindert den Eintritt von Polierpaste
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Drehung um 360°
- ohne Spraykühlung
- Zellglasoptik



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
4:1-Untersetzung	●	X55L	C608
4:1-Untersetzung	—	X55	C618

- max. Geschwindigkeit: 10.000/min⁻¹
 - für EVA- und Profin-Spitzen / Kieferorthopädische Feile (Schaft ø2,36-2,40 mm)*
 - Auf- und Abbevegung Hub 1,4 mm
 - Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
 - Einfach-Wasserstrahl
 - Mikrofilter
 - Zellglasoptik
 - LTA-Profin-Aufsätze nicht im Set enthalten
 - Einrast-Spannfutter
- *Die Verwendung von Feilen mit Metallschaft ist nicht möglich

Gerades Handstück

Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	●	X65L	H273
1:1-Übertragung	—	X65	H274

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min⁻¹
 - für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
 - für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)*
 - Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
 - Einfach-Wasserstrahl
 - Clean-Head-System
 - Zellglasoptik
- * (nur) mit eingesetztem Bohrerstopper



■ Bitte halten Sie die von Ihrem Feilenhersteller angegebene Drehzahl ein. (X35L / X35)

Für maximale Lebensdauer.

Extrem robust durch verstärktes inneres Gehäusedesign und optimiertes Spannfutter.



S-Max M
Winkelstück

S-Max M



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:5-Übersetzung	●	M95L	C1023
1:5-Übersetzung	—	M95	C1026

- max. Geschwindigkeit: 200.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (Ø1,6 mm)
- Edelstahlkörper
- Push-Selbstspannfutter
- Keramik-Kugellager
- Vierfach-Wasserstrahl
- Clean-Head-System
- Zellglasoptik

Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:4-Übersetzung	●	M94L	CA13170001

- max. Geschwindigkeit 160.000 / min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (Ø1,6 mm)
- Edelstahlkörper
- Druckknopf-Spannzange
- Vierfach-Spraykühlung
- Clean-Head-System
- Zellglasoptik

Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	●	M25L	C1024
1:1-Übertragung	—	M25	C1027

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (Ø2,35 mm)
- Edelstahlkörper
- Push-Selbstspannfutter
- Einfach-Wasserstrahl
- Clean-Head-System
- Zellglasoptik

Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
4:1-Untersetzung	●	M15L	C1025
4:1-Untersetzung	—	M15	C1028

- max. Geschwindigkeit: 10.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (Ø2,35 mm)
- Edelstahlkörper
- Push-Selbstspannfutter
- Einfach-Wasserstrahl
- Clean-Head-System
- Zellglasoptik

Gerades Handstück

Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	—	M65	H1008

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (Ø2,35 mm)
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (Ø2,35 mm)*
- Edelstahlkörper
- Einfach-Wasserstrahl
- Clean-Head-System

* (nur) mit eingesetztem Bohrerstopper

FX Serie



Allgemeine Anwendungen

Übersetzungsverhältnis	MODELL	BESTELLCODE
1:1 Übertragung	FX25m	C1052001

- max Geschwindigkeit: 40.000 min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2.35)
- Edelstahlkörper
- Kugellager
- Push-Selbstspannfutter
- Clean Head System

Übersetzungsverhältnis	MODELL	BESTELLCODE
1:1 Untersetzung	FX20m	CA13190001

- max. Geschwindigkeit: 40.000 min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Druckknopf-Spannzange
- Edelstahlkörper
- Clean-Head-System
- Kugellager

Übersetzungsverhältnis	MODELL	BESTELLCODE
4:1 Untersetzung	FX15m	C1053001

- max. Geschwindigkeit: 10.000 min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2.35)
- Edelstahlkörper
- Kugellager
- Push-Selbstspannfutter
- Clean-Head-System

Endodontie

Übersetzungsverhältnis	MODELL	BESTELLCODE
16:1 Untersetzung	FX75m	C1055001

- max. Geschwindigkeit: 2.500 min⁻¹
- für maschinelle Feilen
- Edelstahlkörper
- Drehung um 360°
- Mini-Kopf
- Push-Selbstspannfutter

Übersetzungsverhältnis	MODELL	BESTELLCODE
16:1 Untersetzung	FX74m	CA13200001

- max. Geschwindigkeit: 2.500/min⁻¹
- für Maschinelle Feilen (Ø2,35 mm) / 80° Links- / Rechts- Bewegung
- Push-Selbstspannfutter
- Edelstahlkörper

Übersetzungsverhältnis	MODELL	BESTELLCODE
16:1 Untersetzung	FX70m	CA13250001

- max. Geschwindigkeit: 2.500/min⁻¹
- für Maschinelle Feilen (Ø2,35 mm) / 80° Links- / Rechts- Bewegung
- Push-Selbstspannfutter
- Edelstahlkörper



Prophylaxe

Übersetzungsverhältnis	MODELL	BESTELLCODE
4:1-Untersetzung	FX57m	C1054001

- max. Geschwindigkeit: 5.000/min⁻¹
- für Kelche und Bürstchen zum Einschrauben
- Edelstahlkörper
- Drehung um 360°
- Pastensiegel-Dichtsystem
- ohne Spraykühlung

Übersetzungsverhältnis	MODELL	BESTELLCODE
4:1-Untersetzun	FX58m	CA13210001

- max. Geschwindigkeit: 2.500/min⁻¹
- für Snap-on Kelche und Bürsten
- Pastensiegel-Dichtsystem
- Edelstahlkörper
- Drehung um 360°

Übersetzungsverhältnis	MODELL	BESTELLCODE
4:1-Untersetzung	FX55m	CA13160001

- max. Geschwindigkeit: 10.000/min⁻¹
- für EVA- und Profin-Feilen
- Edelstahlkörper
- Auf- und Abbewegung Hub (Hubhöhe 1,4 mm)

Übersetzungsverhältnis	MODELL	BESTELLCODE
4:1-Untersetzung	FX50m	HA12050001

- max. Geschwindigkeit: 2.500/min⁻¹
- für den Betrieb von Einmal-Prophylaxeköpfen (DPA), DPA nicht enthalten
- Edelstahlkörper

Gerades Handstück

Übersetzungsverhältnis	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	FX65m	H1014001

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- Edelstahlkörper
- Clean-Head-System


MODELL	BESTELLCODE
Sprayclip	H019711
QF Adapter	C877701

Luftmotoren: FX205m Set

MODELL	BESTELLCODE
FX205m M4 Set	Y1002752

- Merkmale:
- Midwest 4-Loch
 - Externe Wassersprüh

- Inhalt:
- Luftmotor (FX205m)
 - Gerades Handstück (FX65m)
 - Winkelhandstück (FX25m)

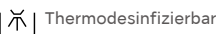

EX Serie

Winkelstückköpfe für allgemeine Anwendungen mit externer Wasserzufuhr*

MODELL	BESTELLCODE
FPB-Y	C875

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter • Kugellager



MODELL	BESTELLCODE
NAC-Y	C032002

- max. Geschwindigkeit: 30.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Schnappverschluss



MODELL	BESTELLCODE
BB-Y	C037

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Schnappverschluss • Kugellage



MODELL	BESTELLCODE
NBBW-Y*	C221

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Schnappverschluss • Kugellager
- mit seitlicher Wassersprühdüse



MODELL	BESTELLCODE
NM-Y*	C247

- max. Geschwindigkeit: 30.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Mini-Kopf • Schnappverschluss



MODELL	BESTELLCODE
FFB-Y	C884

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter



Winkelstückköpfe für Prophylaxe

MODELL	BESTELLCODE
AR-Y(S)	C187

- max. Geschwindigkeit: 5.000/min⁻¹
- für Kelche und Bürstchen zum Einschrauben



MODELL	BESTELLCODE
AR-Y(K)	C188

- max. Geschwindigkeit: 5.000/min⁻¹
- für Kelche mit Einrastmechanismus



MODELL	BESTELLCODE
EVA-Y	C235

- max. Geschwindigkeit: 10.000/min⁻¹
- für Eva-Interdental-Spitzen
- Auf- und Abbewegung Hub 1,4 mm



Winkelstückköpfe für Endodontie

MODELL	BESTELLCODE
MP-Y	C547

- max. Geschwindigkeit: 20.000/min⁻¹
- Mini-Kopf • Push-Selbstspannfutter



MODELL	BESTELLCODE
MPA-Y	C548

- max. Geschwindigkeit: 20.000/min⁻¹
- Anschluss für Apexlokalisator (für langen Schaft)
- Push-Selbstspannfutter • Mini-Kopf



MODELL	BESTELLCODE
MPAS-Y	C882

- max. Geschwindigkeit: 20.000/min⁻¹
- Anschluss für Apexlokalisator (für kurzen Schaft)
- Push-Selbstspannfutter • Mini-Kopf



MODELL	BESTELLCODE
TEQ-Y	C849

- max. Geschwindigkeit: 4.000/min⁻¹
- 80°-Drehbewegung vor und zurück
- für maschinelle Feilen (ø2,35 mm)
- Push-Selbstspannfutter



MODELL	BESTELLCODE
TEP-Y	C837

- max. Geschwindigkeit: 4.000/min⁻¹
- 60°-Drehbewegung vor und zurück
- für Handfeilen • Push-Selbstspannfutter



Unterteile

MODELL	BESTELLCODE
EC-30	C100008

- 1:1-Übertragung



MODELL	BESTELLCODE
ER4	C634

- 4:1-Untersetzung



MODELL	BESTELLCODE
ER4M	C634002

- 4:1-Untersetzung



MODELL	BESTELLCODE
ER10	C635

- 10:1-Untersetzung



MODELL	BESTELLCODE
ER16	C636

- 16:1-Untersetzung



isoE-LUX Lichtsonde



Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	isoE-LUX	Z1265

- E-Typ Optik Motoranschluss
- Edelstahlkörper
- Zellglasoptik

*NM-Y, NRS2-Y, NBBW-Y, MPA-Y erhältlich solange der Vorrat reicht.

■ Unterteile und Köpfe sind separat erhältlich, sodass diese je nach Indikation oder persönlicher Vorliebe kombiniert werden können.

Elektrische Mikromotoren

NLZ E

Elektrischer Mikromotor, Portables System

Interne Wasserzufuhr		
Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	NLZ E S230	Y1004004

- Inhalt**
- NLZ E U (Steuereinheit & Hautpeinheit)
 - NE180 (Netzteil)
 - NLZ (Motor)
 - NLZ CD (Motorkabel, 1,8 m)
 - NLZ U-Halterung

Technische Daten	
Steuergerät	[Motor](nur Mikromotor)
• Abmessungen Steuereinheit: B 76 mm × T 87,1 mm × H 63,4 mm	• Motortyp: Bürstenloser Mikromotor
• Abmessungen Haupteinheit : B 146 mm × T 75 mm × H 48 mm	• Max. Drehmoment: 4,2 Ncm
• Stromversorgung: 230 V 50/60 Hz	• Endodontie Drehmoment: 0,3 -6,0 Ncm*
• Programme: Allgemeiner Anwendungsmodus / 6 Programme	• Motorgeschwindigkeit: 100 -40,000 min ⁻¹
Rotierender Endo-Modus / 6 Programme	• Abmessungen: ø22 × H 68,8 mm
	• Gewicht: 59 g (nur Motor)
	• Licht: LED weiß



NLZ Endo

6:1 Untersetzung		
Licht	MODELL	BESTELLCODE
—	NLZ Endo	C1130

- Max. Drehzahl: 1.000/min⁻¹ (max. Motordrehzahl: 6.000/min⁻¹)
- Motorfeilen (ø2,35) *Für rotierenden Endo-Modus
- WAVE ONE®-Feilen: (ø 2,35) *Für Reziproken Endo-Modus
- Druckknopf-Spannzange



Luftmotoren

Ti-Max X205L

Interne Wasserzufuhr		
Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	X205L	M1013

- max. Geschwindigkeit: 23.000/min⁻¹ ±10 %
- 360-Grad-Drehgelenk mit Licht • 32.000 LUX
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Rücksaugstopp



S-Max M205

Interne Wasserzufuhr		
Licht	MODELL	BESTELLCODE
—	M205	M1007

- max. Geschwindigkeit: 22.000/min⁻¹ ±10 %
- Midwest-4-Loch
- Edelstahlkörper
- Rücksaugstopp



FX205m

Externe Wasserzufuhr		
Licht	MODELL	BESTELLCODE
—	FX205m M4	M1005001
—	FX205m B2	M1006001

- max. Geschwindigkeit: 22.000/min⁻¹ ±10 % (M4), max. Geschwindigkeit: 25.000/min⁻¹ ±10 % (B2)
- Midwest-4-Loch / Borden-2-Loch
- Edelstahlkörper



Ersatzteile

Ti-Max Z Turbinen

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
TiZ9-SU03 Einsatz für Standard-Kopf		PA2381X001
TiZ9-MU03 Einsatz für Mini-Kopf		PA2380X001
SX3-NU03 Einsatz für Z Micro-Kopf		PA2307X001
PTL O-Ring Set (5er-Set O-Ringe)		Y900580

S-Max M Turbinen

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
SX-MU03 Einsatz für Mini-Kopf		P1280
SX-SU03 Einsatz für Standard-Kopf		P1281

S-Max pico Turbinen

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
SX-PU03 Einsatz für S-Max pico		P1140200
PTL O-Ring Set (5er-Set O-Ringe)		Y900580

Ti-Max X450 Turbinen

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
TiX45-SU03 Einsatz für Standard-Kopf		Y1001906
PTL O-Ring Set (5er-Set O-Ringe)		Y900580

Pana-Max PLUS Turbinen

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
SX-MU03 Einsatz für Mini-Kopf		P1280
SX-SU03 Einsatz für Standard-Kopf		P1281

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
TiZ9-SU04 Kopfdeckel für Z990		PA2381X050
TiZ9-MU04 Kopfdeckel für Z890		PA2380X050
SX-NU04 Kopfdeckel für Z micro		PA2307X050

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
PTL O-Ring Set 5er-Set O-Ringe)		Y900580
SX-MU04 Kopfdeckel für M800		P1001500

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
SX-PU04 Kopfdeckel für S-Max pico		P1140500

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
TiX45-SU04 Kopfdeckel für Standard-Kopf		P1078500

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
SX-MU04 Kopfdeckel für Mini-Kopf		P1001500
SX-SU04 (YOS) Kopfdeckel für Standard-Kopf		P1027500

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
TiZ9-SU05 Kopfdeckelschlüssel für Z990 / Z890		PA2381X765
SX-NU05 Kopfdeckelschlüssel für Z micro		PA2307X765
Reinigungsdraht		Z144101

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
SX-SU04 (YOS) Kopfdeckel für M900		P1027500
SX-SU05 Kopfdeckelschlüssel für Mini- und Standard-Kopf		20000535

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
SX-PU05 Kopfdeckelschlüssel für S-Max pico		20002803

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
Kopfdeckel-schlüssel X450		P624765

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
SX-SU05 Kopfdeckelschlüssel für Mini- und Standard-Kopf		20000535

Pana-Max2 Turbinen

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
PAX2-SU03 Einsatz		P1190

Kupplungen

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
TA Lampe für KCL-6 (3er-Packung)		Y900132
PTL -Lampe für PTL (3er-Packung)		Y900529

FX Serie

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
FX25-04 Kopfdeckel für FX25m/FX15m		C1052500
FX25-03 Einsatz für FX25m/FX15m		C1052700

EX Serie

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
FPB-03 Einsatz für FPB-Modelle		C875060
NAC-03 Einsatz für NAC-Modelle		C030011
BB-03 Einsatz für BB-Modelle		C037015
NBB-03 Einsatz für NBB/NBBW-Modelle		C210015

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
PAX2-SU04 Kopfdeckel		P1190050

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
O-Ring Set für KCL-6/LED		Y900211

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
Sprayclip für FX25m/FX15m		C1052702
Sprayclip für FX65m		H019711

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
FFB-03 Einsatz für FPB-Modelle		C884060
Sprayclip für NAC, BB, FPB, FFB, TEP		C032701
Sprayclip für EX-5B		H019711
FPB-02 mittleres Getriebe für FPB-Y		C875012

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
PAX2-SU05		P1190765

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
O-Ring Set für SCL-LED		S900060

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
Schlüssel für FX25/FX15		C1052701
Schlauch (RSM)		Z166101

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
NAC-02 mittleres Getriebe für NAC-Y		C032012
Kopfdeckelschlüssel für AR-Y(S)		C185751
Kopfdeckelschlüssel (schwarz)		C071751
Schlauch		Z166101

KaVo und Multiflex sind eingetragene Warenzeichen der KaVo Dental GmbH.
Dentsply Sirona und Sirona sind eingetragene Warenzeichen der Dentsply Sirona Inc.
W&H und Roto Quick sind eingetragene Warenzeichen der W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.
Bien Air und UNIFIX sind eingetragene Warenzeichen der Bien-Air Holding SA.
EMS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ferton Holding SA.

NAKANISHI INC. www.nsk-dental.com
700 Shimohinata, Kanuma
Tochigi 322-8666, Japan

NSK Europe GmbH www.nsk-europe.de
Elly-Beinhorn-Str. 8
65760 Eschborn, Germany

Änderungen vorbehalten.